



# HEMOSURE® iFOB TEST

-Immunochemical Fecal Occult Blood Test (FIT)




Note: No Dietary or Drug Restrictions

## Patient Instructions

### STEP 1 Sample Deposit

**A** Lift toilet seat and position sample collection paper across the rim of the toilet bowl. Secure adhesive tabs to the sides of toilet rim. Lower the toilet seat.

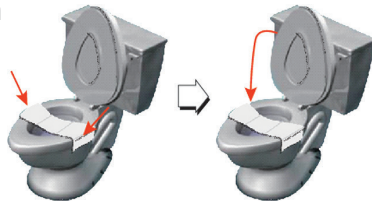

**B** Make bowel movement onto collection paper.




### Attention!

Fill out personal information on attached label on tubes.




### STEP 2 Sample Collection


**A** Unscrew the purple cap from the sample collection tube. **DO NOT POUR OUT THE LIQUID.**

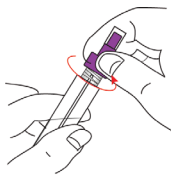

**B** Poke spiral applicator into stool at 6 different sites. Use only enough fecal material to cover the tip of the applicator. **DO NOT CLUMP, SCOOP, OR FILL THE TUBE.**

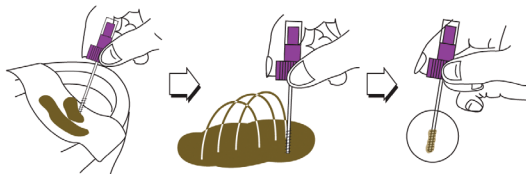

**C** Screw the applicator back into the tube and secure tightly.

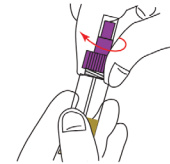

### STEP 3 Sample Return

**A** Complete the address return envelope to your doctor or laboratory.



**B** Insert sample collection tube into specimen pouch and seal. Insert specimen pouch into return envelope and seal.



**C** Return the sample packet immediately to the clinic or laboratory by mail or in person.



HEMOSURE, INC.

Hemosure logo is a registered trademark of Hemosure, Inc.





# HEMOSURE® iFOB TEST

-Prueba inmunológica para detectar sangre oculta en material fecal (FIT)




Nota: Sin restricciones alimenticias o de medicamentos

## Instrucciones para el paciente

### PASO 1 *Depósito de la muestra*

**A**

Levante el asiento del inodoro y coloque el papel de recolección a lo largo del borde de la taza del inodoro. Asegure las lengüetas adhesivas a los lados del borde del inodoro. Baje el asiento del inodoro.

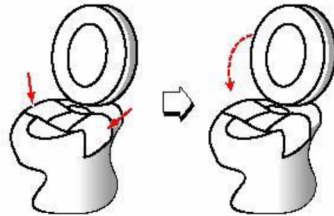

**B**

Evacúe o defaque sobre el papel de recolección.



**¡Atención!**


Coloque su información personal en las etiquetas de los tubos.



### PASO 2 *Recolección de la muestra*


**A**

Desatornille la tapa morada del tubo de recolección de muestra. **NO TIRE EL LÍQUIDO QUE ESTÁ ADENTRO**

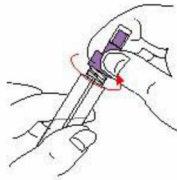


**B**

Introduzca la punta del aplicador en espiral en 6 lugares diferentes de las heces. Utilice solamente la material fecal necesaria para cubrir la punta del aplicador. **NO AMONTONE, PONGA CUCHARADAS O TRATE DE LLENAR EL TUBO.**

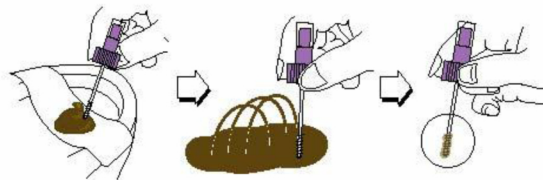

**C**

Atornille de nuevo el aplicador dentro del tubo y apriételo de manera segura.

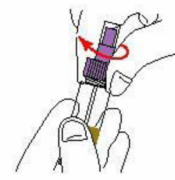

### PASO 3 *Devolución de la muestra*

**A**

Escriba el remitente en el sobre y envíelo a su doctor o laboratorio.



**B**

Introduzca el tubo con la muestra recolectada dentro de la bolsa para espécimen y séllela. Introduzca la bolsa del espécimen dentro del sobre y séllelo.



**C**

Regrese inmediatamente el paquete con la muestra a la clínica o al laboratorio por correo o en persona.



**HEMOSURE, INC**

